猫背矯正機

コンセプト

猫背の人達は矯正ベルトを何度も付けてる間に付け心地が悪いとなど、付けるのがめんどくさくなり、それ以降付けなくなるケースがあります。

猫背矯正機は矯正ベルトとは違い頭と肩から引張ることで負担が分散され一日中付けなくても自分の好きな時に自分が思う張り具合に調整することでストレスが減り、自分から進んで猫背矯正することができます。そこで私は借りるだけで誰かに手伝って安全かつストレスフリーに猫背のリハビリができる猫背矯正機を考えました。

→ 注 単位:mm


使用しているイメージ -

猫背の状態




ストラップの取り付けを行い、リモコンの上ボタンを押すと 背もたれに向かって引っ張られます。

伸ばしている状態

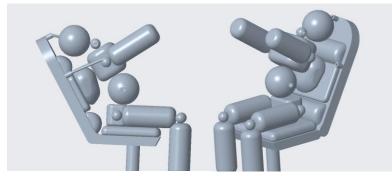

ストラップと背もたれにより、背筋を正します。伸ばしたの を緩め、その後はこの二段階の工程のストレッチを繰り返し ます。

特徴

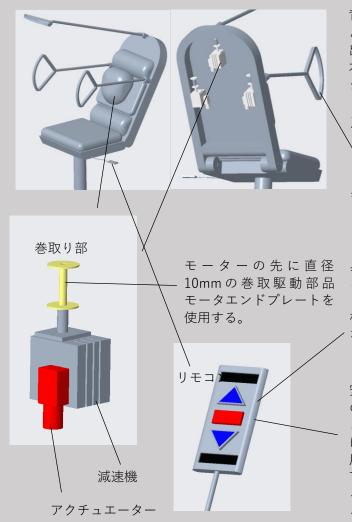

背もたれは頭と肩が背中より後ろに来るように出っ張りがある。材質は木材であり、その上からクッションをかぶせる。

肩のストラップは服を着るのと同じ感覚で付ける ことができ、頭のストラップはバンダナと同じ 感覚で取り付け、取り外 しができる。

リモコンを使い引っ張り 具合を調整することに よって人に手伝ってスト レッチする手間を省きで 相手の感覚に頼るのでスト なく自分のお好みでスト レッチができる。

安全装置としてリモコン の非常用ボタンを押すことで引っ張りが緩む構造 になっている。これはは 用のストラップが首まで るケースなどが想定で る。。

設定したスペック

速度	0.166m/s
トルク	10N/m
直径	10mm

使用する部品

Bringsmart DC モーター 高トルク 小型 ギヤード モーター



定格回転数:2rpm 定格トルク:14kg.cm 定格電圧: 12V

定格電流: 180ma 定格電力: 1.1W; 6V

ウォームギア 減速機 NMRV-030



減速比10:1 Nema23 入力穴11mm 出力軸14mm

レンタル料金:5000円/月